


WHITE U

SMILE WHITENING KIT

ISTRUZIONI D'USO HOW TO USE


1

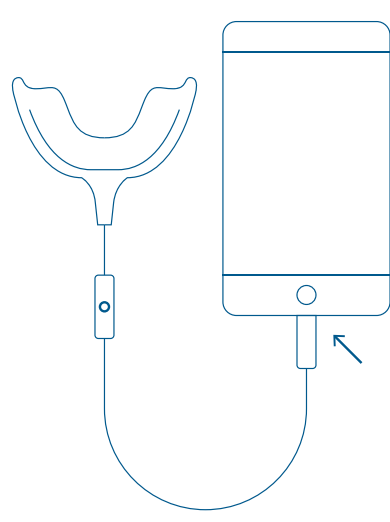

Collega il cavo della mascherina led al tuo Smartphone.

Connect the LED light cable to your Smartphone.


2

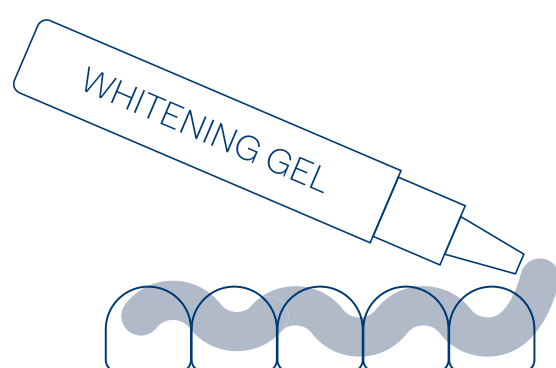

Apri la penna sbiancante e gira l'estremità inferiore, applica il gel sui denti fino ad ottenere uno strato uniforme.

Open the whitening pen, apply a layer of gel to teeth, approximately 1 mm thick.

3

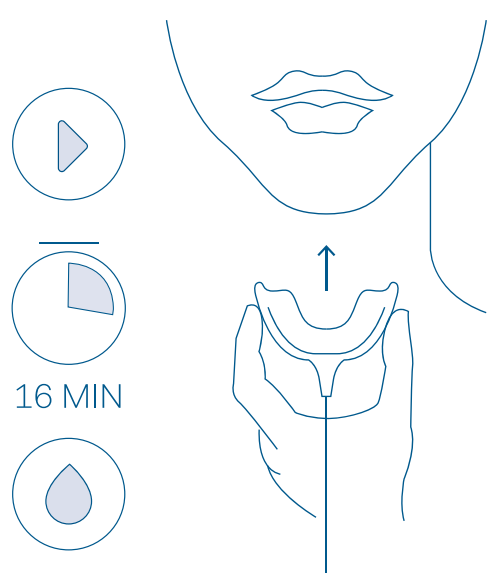


Inserisci la mascherina in bocca, premi il pulsante situato sul cavo e inizia a sbiancare i tuoi denti. La luce led attiva il gel e si spegne automaticamente dopo solo 16 minuti.

Insert the LED mouth piece, press the start button.

The light activates the gel and turns off automatically after 16 minutes.


4

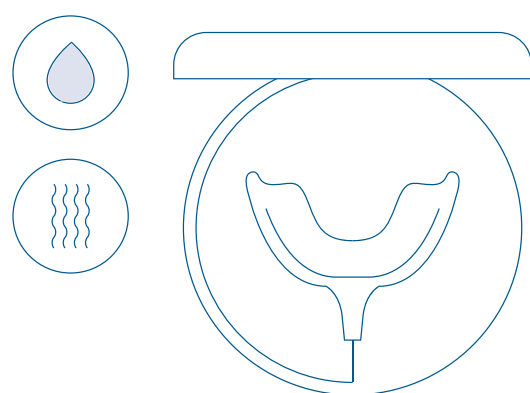

Terminato l'uso, sciacqua bocca e mascherina led con acqua, asciugua la mascherina e riponila nella sua custodia protettiva.

After use, rinse your mouth and the LED mouth piece with water, dry the mouthpiece and store it in its protective case.

CONSIGLI DI UTILIZZO TIPS

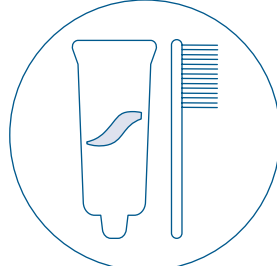


Pulisci i denti con spazzolino e dentifricio WHITE U prima del trattamento.

Clean teeth by brushing with WHITE U toothpaste before treatment




Evita l'assunzione di tabacco, cibi e bevande coloranti come vino, caffè, tè prima e dopo l'applicazione.

Avoid the intake of highly pigmented foods, tobacco and coloured beverages such as wine, coffee, tea before and after application.

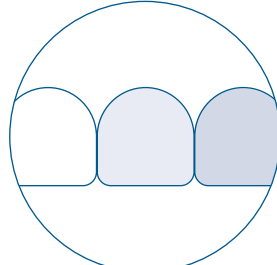

Usa la guida tonalità denti per annotare i tuoi risultati.

Use the smile shade guide to monitor your results.

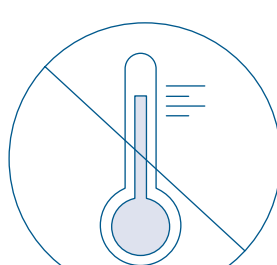

Non pulire la mascherina LED con acqua bollente.

Do not clean the LED mouthpiece with boiling water.



Per risultati ottimali si consiglia l'uso quotidiano di WHITE U SMILE WHITENING KIT.

For best results we recommend a daily use of WHITE U SMILE WHITENING KIT.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI CAUTION

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Contiene parti facilmente ingeribili. Prodotto per solo uso cosmetico dentale da utilizzare solo da persone adulte. Non destinato ai bambini di età inferiore ai 12 anni. Tutti i prodotti sbiancanti cosmetici non sono un sostituto a cure odontoiatriche regolari. Si prega di consultare un medico prima dell'uso in caso di gravidanza, allattamento, allergie note a resine e prodotti chimici, patologie e/o recenti interventi orali. Non ingerire.

Keep out of reach of children. Contains easily swallowed parts. Product for cosmetic dental use only, to be used only by adults. Not intended for use in children under the age of 12. All of cosmetic whitening products are not a substitute for regular dental care. Please seek medical advice prior to using in case of pregnancy, breastfeeding, allergies to resins/chemicals, pathologies and/or recent oral procedures. Do not swallow.



APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
EQUIPMENT ELECTRIC AND ELECTRONICS



PACKAGING ESTERNO
EXTERNAL PACKAGING

© Copyright. All rights reserved

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta da parte di WHITE U SRL che ne detiene il possesso.